

NORIKS Bunion Fix — korektor vybočeného palca

Postupné narovnávanie palca pri 30 minútach až 3 hodinách denne.

Veľkosť	Univerzálny — vhodný pre všetky veľkosti chodidla
Strana	Rovnaký korektor pre ľavé aj pravé chodidlo
Podložka	Mäkká vnútorná podložka, ktorá chráni kožu
Nastavenie	Elastické pásky s nastaviteľným ťahom
Odporúčané	Od 30 minút do 3 hodín denne



V BALENÍ

- 1 korektor vybočeného palca
- Elastické pásky na nastavenie


RÝCHLY ŠTART

1. Nasadte korektor tak, aby vankúšik ležal pri vystúpenej kosti a pútko obopínalo palec.
2. Pásku utiahnite len natoľko, aby ste cítili mierny ťah — nikdy do bolesti.
3. Prvý týždeň noste 30 minút denne, potom postupne predlžujte.

1. Nasadenie

- 1 Sadnite si a oprite chodidlo tak, aby prsty boli uvoľnené.
- 2 Pretiahnite palec pútkom, kým vankúšik nedosadne na vystúpenú kosť na boku chodidla.
- 3 Pásku vedte okolo stredu chodidla a utiahnite ju len natoľko, aby ste cítili mierny ťah.
- 4 Skontrolujte, že vankúšik leží rovno, bez záhybov, a že páska netlačí priehlavok.
- 5 Palec musí byť ťahaný von, ale bez napätia, ktoré spôsobuje bolesť.

Udobno, prilagodlivo i lako za nošenie kod kuće

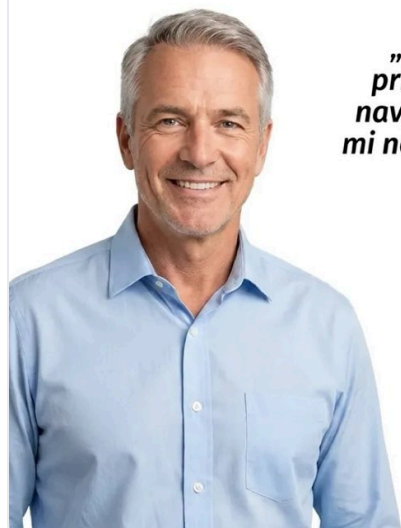

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Korektor obopína palec a odľahčuje vystúpenú kosť.

Zašto je Noriks drugačiji:



Cieľom je postupný návrat palca do správnejšieho postavenia.

2. Plán nosenia

Obdobie	Denne	Kedy
1. týždeň	30 minút	Večer posediačky
2. týždeň	45 – 60 minút	Večer alebo pri odpočinku
3. týždeň	1 – 2 hodiny	Rozdelené do dvoch úsekov
Od 4. týždňa	2 – 3 hodiny	V jednom alebo dvoch úsekoch, podľa pohodlia

Pravidelnosť je dôležitejšia než dĺžka. Tridsať minút každý deň prinesie viac než tri hodiny raz týždenne.

3. Čo môžete očakávať

- Prvé dni: pocit pretiahnutia a úľavy po zložení korektora.
- Približne po dvoch týždňoch dôsledného používania: menšie nepohodlie pri chôdzi a státí.
- Približne po mesiaci: viditeľnejšia zmena v postavení palca.
- Korektor pôsobí, kým ho nosíte, a pri pravidelnom používaní — nie je to jednorazové riešenie.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Bolesť pri nosení	Páska utiahnutá príliš	Povolte pásku; pocit musí byť ťah, nikdy bolesť
Korektor sa zošmykuje z palca	Páska utiahnutá príliš voľne alebo vlhká koža	Osušte chodidlo a utiahnite pásku o jeden stupeň
Začervenanie kože	Záhyb na podložke alebo spočiatku príliš dlhé nosenie	Zarovnajte podložku a skráťte čas nosenia na 30 minút

5. Čistenie

- Utrite vlhkou handričkou a jemným mydlom, opláchnite a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Neperte v práčke a nesusťte na radiátore — guma stráca pružnosť.

Nenoste korektor cez otvorenú ranu ani zapálenú kožu. Pri cukrovke, zníženom cíte v chodidle alebo silnej, trvalej bolesti sa najprv poraďte s lekárom.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 14 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.
- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

Bunion Fix je každodenná opora, nie liečba. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavia po úraze, obráťte sa na lekára.