


Kompresné pančuchy NORIKS so zipsom

Odstupňovaná kompresia 15–20 mmHg s bočným zipsom.

Kompresia	15 – 20 mmHg, odstupňovaná (najsilnejšia pri členku)
Zips	Bočný zips s ochrannou vnútornou légou
Veľkosti	S/M, L/XL, 2XL — podľa obvodu lýtky
Nosenie	Cez deň, až 12 hodín
Pranie	Ručne v studenej vode alebo šetrný program

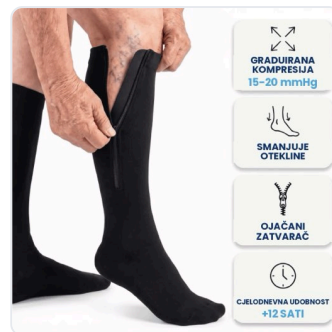

V BALENÍ

- 1 pár kompresných pančúch (podľa zvoleného balenia)

RÝCHLY ŠTART

1. Zmerajte obvod lýtky v najširšom mieste a zvolte veľkosť z tabuľky.
2. Pančuchy si obúvajte ráno posediačky, skôr než nohy opuchnú.
3. Zips zapínajte od členka nahor a látku pritom držte pri nohe.

1. Výber veľkosti

Veľkosť	Obvod lýtky	Veľkosť obuvi
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Veľkosť zvolte podľa **obvodu lýtky**, nie podľa veľkosti obuvi. Merajte ráno, v najširšom mieste lýtky, s uvoľnenou nohou. Ak ste na hranici dvoch rozsahov, vezmite väčšie číslo.

2. Obúvanie

1. Sadnite si a rozopnite zips až nadoraz.
2. Natiahnite pančuchu cez chodidlo tak, aby päta zapadla do tvarovanej časti.
3. Zarovnajte pančuchu na lýtku bez jediného záhybu — záhyby vytvárajú tlakové miesta.
4. Jednou rukou pritlačte látku k nohe, aby ochranná léga zostala medzi zipsom a kožou, druhou pomaly zapnite zips od členka nahor.
5. Skontrolujte, že sa horný okraj neroluje a nezarezáva do kolena.

VIŠE OD 5.200 ZADOVOLJNIH KUPACA



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obući cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Zips ulahčuje obúvanie bez ťahania.



Odstupňovaná kompresia: najsilnejšia pri členku, slabšia smerom ku kolenu.

3. Ako dlho nosiť

- Obujte ich ráno a noste cez deň — približne do 12 hodín.
- Pred spaním ich vyzlečte, ak lekár neurčil inak.
- Pri dlhom stáťí, sedení alebo cestovaní ich noste počas celej aktivity.
- Prvých pár dní môže kompresia pôsobiť nezvyčajne — začnite s 2 až 3 hodinami denne.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Zips sa sám rozopína	Látka je stiahnutá nadol alebo je obvod na hornej hranici	Pred zapnutím vytiahnite pančuchu vyššie na lýtko; ak sa to opakuje, vezmite väčšie číslo
Nemôžem zapnúť zips	Príliš malá veľkosť alebo opuchnutá noha	Obúvajte ráno; ak to nejde ani vtedy, vymeňte za väčšie číslo
Mravčenie, studené alebo bledé prsty	Príliš silná kompresia alebo záhyb, ktorý tlačí	Pančuchu ihneď vyzlečte, zarovnajte a obujte znova; ak sa to opakuje, obráťte sa na lekára
Pančucha sa zosúva nadol	Obvod lýtko na spodnej hranici rozsahu	Vezmite menšie číslo
Červené stopy na koži	Záhyb alebo príliš utiahnutý horný okraj	Zarovnajte látku; mierny odtlačok úpletu je normálny, hlboko vtlačená stopa nie

5. Pranie a starostlivosť

- Perte ručne v studenej vode alebo v práčke na programe pre jemnú bielizeň, so **zapnutým zipsom** a v sieťovom vrecku.
- Bez bielidla a aviváže — poškadzujú elastické vlákna, ktoré vytvárajú kompresiu.
- Sušte na vzduchu naplocho. Nie v sušičke, na radiátore ani na slnku.
- Zips občas utrite vlhkou handričkou, aby v ňom nezostávali vlákna.

- Pri každodennom nosení pár vymeňte zhruba každých 6 mesiacov — kompresia časom slabne.

Pred nosením sa poraďte s lekárom, ak máte ochorenie periférnych tepien, otvorené rany, akútny zápal kože, diabetické zmeny na nohe alebo hlbokú žilovú trombózu.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 14 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.
- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

Kompresné pančuchy sú každodenná opora, nie liečba. Nestanovujú diagnózu a nenahrádzajú radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavujú po úraze, obráťte sa na lekára.