

NORIKS Bunion Fix — korektor vybočeného palca

Postupné narovnávanie palca pri 30 minútach až 3 hodinách denne.

Veľkosť	Univerzálny — vhodný pre všetky veľkosti chodidla
Strana	Rovnaký korektor pre ľavé aj pravé chodidlo
Podložka	Mäkká vnútorná podložka, ktorá chráni kožu
Nastavenie	Elastické pásky s nastaviteľným ťahom
Odporúčané	Od 30 minút do 3 hodín denne



V BALENÍ

- 1 korektor vybočeného palca
- Elastické pásky na nastavenie


RÝCHLY ŠTART

1. Nasadte korektor tak, aby vankúšik ležal pri vystúpenej kosti a pútko obopínalo palec.
2. Pásku utiahnite len natoľko, aby ste cítili mierny ťah — nikdy do bolesti.
3. Prvý týždeň noste 30 minút denne, potom postupne predlžujte.

1. Nasadenie

- 1 Sadnite si a oprite chodidlo tak, aby prsty boli uvoľnené.
- 2 Pretiahnite palec pútkom, kým vankúšik nedosadne na vystúpenú kosť na boku chodidla.
- 3 Pásku vedte okolo stredu chodidla a utiahnite ju len natoľko, aby ste cítili mierny ťah.
- 4 Skontrolujte, že vankúšik leží rovno, bez záhybov, a že páska netlačí priehlavok.
- 5 Palec musí byť ťahaný von, ale bez napätia, ktoré spôsobuje bolesť.

Udobno, prilagodlivo i lako za nošenie kod kuće

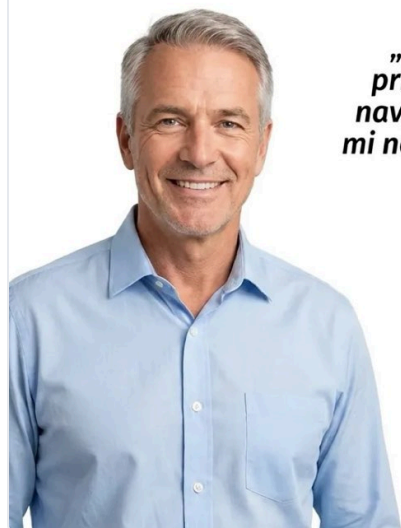

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Korektor obopína palec a odľahčuje vystúpenú kosť.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija poravnanja



Patentirani zglobni mehanizam



Podesivo rastezanje



Meko jastučić za čukalji



Vrhunski izdržljivi materijali



Bezbolno poravnanje

Cieľom je postupný návrat palca do správnejšieho postavenia.

2. Plán nosenia

Obdobie	Denne	Kedy
1. týždeň	30 minút	Večer posediačky
2. týždeň	45 – 60 minút	Večer alebo pri odpočinku
3. týždeň	1 – 2 hodiny	Rozdelené do dvoch úsekov
Od 4. týždňa	2 – 3 hodiny	V jednom alebo dvoch úsekoch, podľa pohodlia

Pravidelnosť je dôležitejšia než dĺžka. Tridsať minút každý deň prinesie viac než tri hodiny raz týždenne.

3. Čo môžete očakávať

- Prvé dni: pocit pretiahnutia a úľavy po zložení korektora.
- Približne po dvoch týždňoch dôsledného používania: menšie nepohodlie pri chôdzi a státí.
- Približne po mesiaci: viditeľnejšia zmena v postavení palca.
- Korektor pôsobí, kým ho nosíte, a pri pravidelnom používaní — nie je to jednorazové riešenie.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Bolesť pri nosení	Páska utiahnutá príliš	Povolte pásku; pocit musí byť ťah, nikdy bolesť
Korektor sa zošmykuje z palca	Páska utiahnutá príliš voľne alebo vlhká koža	Osušte chodidlo a utiahnite pásku o jeden stupeň
Začervenanie kože	Záhyb na podložke alebo spočiatku príliš dlhé nosenie	Zarovnajte podložku a skráťte čas nosenia na 30 minút

5. Čistenie

- Utrite vlhkou handričkou a jemným mydlom, opláchnite a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Neperte v práčke a nesusťte na radiátore — guma stráca pružnosť.

Nenoste korektor cez otvorenú ranu ani zapálenú kožu. Pri cukrovke, zníženom cíte v chodidle alebo silnej, trvalej bolesti sa najprv poraďte s lekárom.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.
- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

Bunion Fix je každodenná opora, nie liečba. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavia po úraze, obráťte sa na lekára.